



# STABILO MULTISEAT

## fotelik samochodowy

z tapicerką dostosowującą się do budowy dziecka

# car safety seat

with the padding adjustable to a child's body



[WWW.STABILO.KRAKOW.PL/MULTISEAT](http://WWW.STABILO.KRAKOW.PL/MULTISEAT)



FOTELIK SAMOCHODOWY  
CAR SAFETY SEAT



SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE  
ORTHOPAEDIC SEAT



HUŚTAWKA  
SWING



LEKTYKA  
LITTER

## STABILO MULTISEAT

z tapicerka dostosowującą się do budowy ciała

with the padding adjustable to a child's body

### PRZEZNACZENIE

Fotelik przeznaczony jest dla osób zarówno o obniżonym napięciu mięśniowym jak i dla osób z MPD i spastycznością.

### DZIAŁANIE

Dzięki zastosowaniu systemu STABILO dopasujesz kształt i twardość fotelika do potrzeb każdej osoby.

- skorygujesz nieprawidłowe ułożenie miednicy
- ustabilizujesz tułów za pomocą bocznych pelot - zabezpieczysz przed deformacjami
- wymodelujesz odpowiednie, asymetryczne podparcie pleców w przypadku kifozy, skoliozy czy pogłębionej lordozy
- dzięki regulowanemu zagłówkowi, prawidłowo zabezpieczysz głowę i odcinek szyjny

### ZASTOSOWANIE

- jako fotelik samochodowy (certyfikowany wg ECE R44/04)
- jako siedzisko ortopedyczne stabilizujące plecy i głowę do przytwierdzenia do krzesła/fotela
- jako huśtawka w domu i na zewnątrz
- jako lektyka do przenoszenia dziecka na krótkie dystanse – można użyć pasów mocujących huśtawkę w przypadku przenoszenia dziecka przez dwie osoby
- jako wypełnienie bujanego fotela

### INDICATION

The seat is designed for children with low muscle tension or with CP and spasticity.

### ACTION

Thanks to the use of STABILO system you can adjust both the shape and the hardness of the seat according to the needs of each person.

- correct an improper position of the pelvis
- stabilize the trunk with side supports thus prevent it from deformities
- shape appropriate, asymmetrical support for the back in case of kyphosis, scoliosis or hyperlordosis
- thanks to the adjustable headrest you will correctly protect the head and cervical spine (neck)

### USE

- as a child car safety seat (certified according to ECE R44/04)
- as an orthopaedic seat stabilizing both the back and head and being mounted to a chair/armchair
- as an indoor/outdoor swing
- as a short distance litter – you can use the swing straps when two persons carry a child
- as an insert to the rocking chair

BEZPIECZEŃSTWO

STABILO MULTISEAT jest fotelikiem samochodowym certyfikowanym według europejskiej normy bezpieczeństwa ECE R44/04. Własne pasy mocujące i konieczność przewleczenia samochodowego pasa bezpieczeństwa zapewniają utrzymanie fotelika w razie niebezpiecznej sytuacji na drodze.

KOMFORT

STABILO MULTISEAT jest jedynym na rynku fotelikiem samochodowym zaprojektowanym specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Jego podstawą jest system próżniowych poduszek STABILO, które można dowolnie formować według potrzeb dziecka. Stąd jazda nawet przez dłuższy czas jest wygodna.

STABILIZACJA

Poduszki STABILO wypełniające fotelik MULTISEAT służą przede wszystkim do ułożenia ciała w prawidłowy sposób – od miednicy po głowę. Dzięki temu u dziecka nie utrwalają się wady postawy nawet podczas jazdy samochodem.

ELASTYCZNOŚĆ

W foteliku istnieje możliwość regulacji wysokości zagłówka, rozpiętości bocznych pelot, a także podpięcia klina, który w razie potrzeby umożliwi odchylenie siedziska. Pasy mocujące i pas biodrowy mogą być wydłużane lub skracane dzięki klamrom.

UNIwersALNOŚĆ

STABILO MULTISEAT może być użytkowany w domu, w samochodzie i na zewnątrz w różnych sytuacjach.

SAFETY

The MULTISEAT is a child car safety seat certified according to the European safety standards ECE R44/04. Both the mounting straps it is equipped with and the necessity of strapping through and fastening the car safety belt provide holding of the device in the event of a sudden deceleration.

COMFORT

The STABILO MULTISEAT is the only child car safety seat designed specifically for special needs children. It is based on the STABILO system of vacuum posture cushions, which can be freely shaped to meet a child's needs. This way even a long ride is comfortable.

STABILIZATION

The STABILO cushions being a padding of the MULTISEAT serve primarily to position the body in a proper way – from the pelvis to the head. Consequently, a child does not experience further deformities even during a ride.


FLEXIBILITY

We can adjust the headrest in the STABILO MULTISEAT, as well as the width of the side supports. There is a possibility to attach a wedge-shaped metal platform to gain a tilt.

VERSATILITY

The STABILO MULTISEAT can be used at home, in a car and outdoor in various situations.

WYMIARY

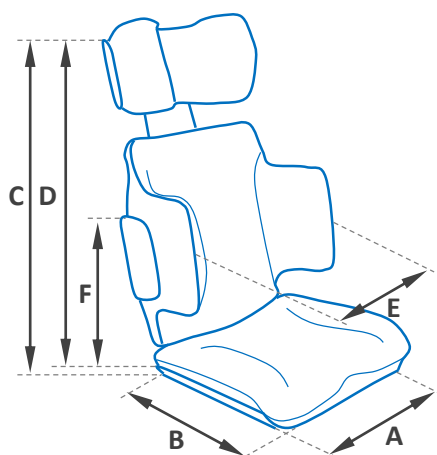

MEASUREMENTS

[cm]	A	B	C	D	E	F
M	56	40	43	52	35	30
L	73-82	42	50	67-76	40	38

## STABILO MULTISEAT fotelik samochodowy

### STABILO MULTISEAT ZAWIERA

- A. STELAŻ aluminiowy
- B. STABILO BASE Velcro
- C. STABILO CONFORTABLE PLUS Velcro
- D. STABILO HEADREST Velcro
- E. ZESTAW PASÓW



### AKCESORIA DODATKOWE

- 1. kamizelka
- 2. pasy stabilizujące miednicę i odwodzące uda
- 3. platforma w kształcie klina umożliwiająca odchylenie siedziska



## STABILO MULTISEAT cer safety seat

### STABILO MULTISEAT CONSISTS OF

- A. aluminium FRAME
- B. STABILO BASE Velcro
- C. STABILO CONFORTABLE PLUS Velcro (modified for the MULTISEAT)
- D. STABILO HEADREST Velcro
- E. SET OF STRAPS

### ADDITIONAL ACCESSORIES

- 1. 4-points holding vest
- 2. STABILO SHORTS for positioning of the pelvis and legs abduction
- 3. wedge-shaped platform for tilt

Sprawdź również / Check also:



STABILO GRANDE



STABILO BEANSEAT VELCRO

Znajdź PODUSZKI STABILO na: / Find STABILO CUSHIONS on:



**NOEL s.c.**  
Ul. Kołodziejska 1  
30-607 Kraków  
POLAND